


## 微酸性电解水生成器（口腔护理机）使用说明

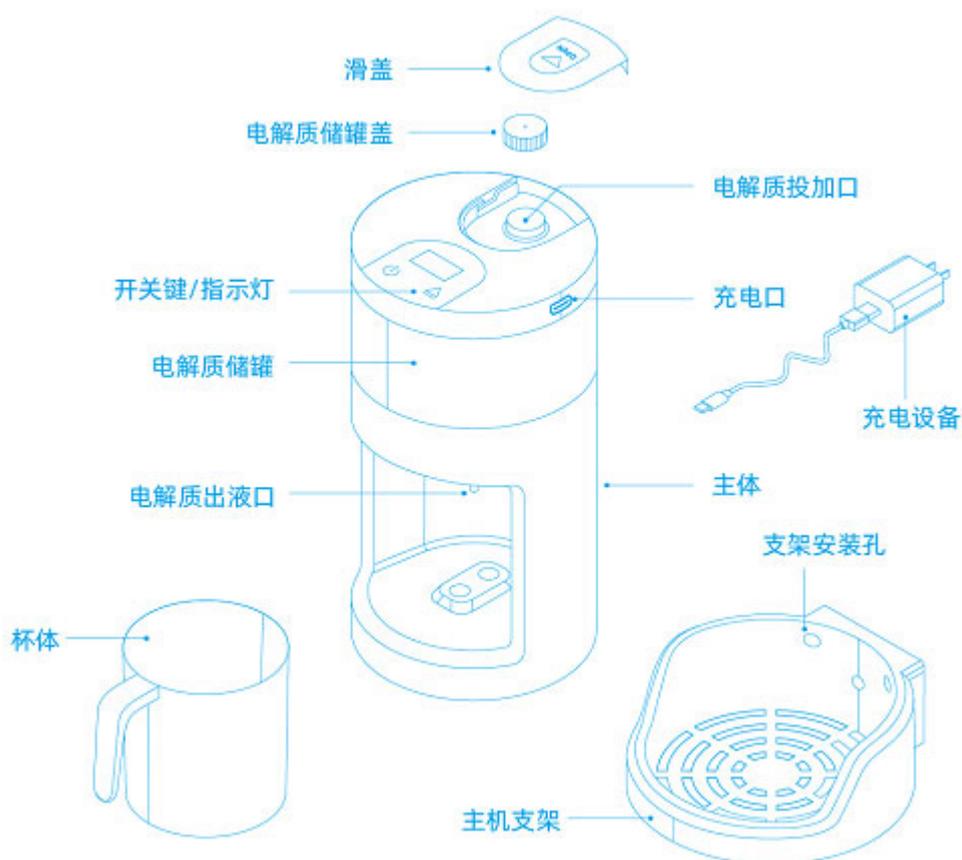

### 电解及杀菌抑菌过程

本产品通过电解含有电解质的水，产生次氯酸，其制成的微酸性电解水的有效浓度为 10-30PPM,其 p h 值在 5-6.5 之间。


微酸性电解水在杀菌时，会有三种杀菌方式：

1. 次氯酸与细菌和病毒接触后，释放出氧离子，分解形成的氧离子具有极强的氧化性，使细菌和病毒上的蛋白质等物质发生变性，从而杀死细菌和病毒。
2. 次氯酸分子小，不带电荷，可渗透入细菌和病毒体内，与细菌和病毒的蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死细菌和病毒。
3. 次氯酸产生出的氯离子能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。

通过杀死大部分口腔中的细菌，本产品产生的消毒水能达到有效的抑菌效果。同时通过杀死产生口腔异味的细菌，能够达到一定的清除口腔异味的效果。

未完成消杀的微酸性电解水，排入自然界后，在敞开或者不避光的条件下，可自行分解不产生有害残留，对环境无污染，可直接进行排放。

## 安装说明

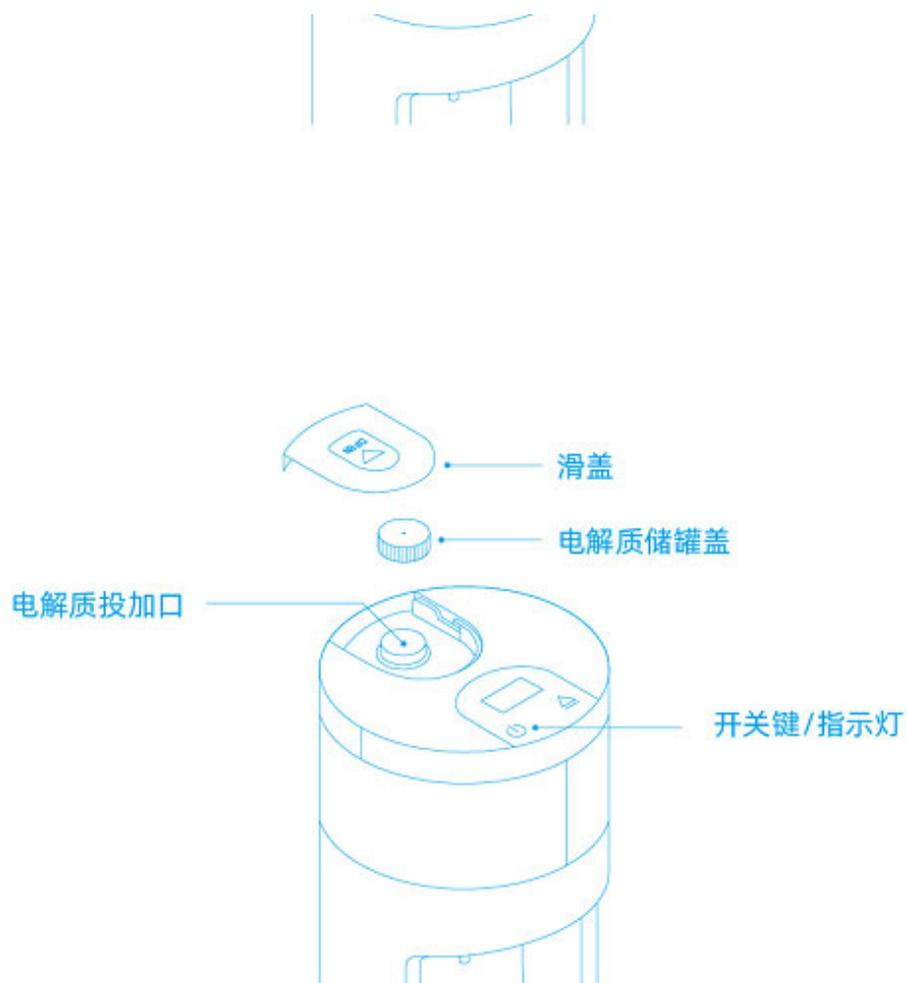

## 微酸性电解水的杀菌效果如下

消杀目标	有效浓度	消杀方式	消杀率
大肠杆菌 金黄色葡萄球菌 白色念珠菌	10-30ppm	20ml 口含 或漱口	≥90%

## 状态信息

1、开机	电源键与启动键灯亮	电量灯绿色正常	红色为电量低
2、启动	运行灯	绿色运行中	红色水杯没就位
3、充电	电量灯	绿色为充满	红色充电中

蓝鱼科技微酸性电解水生成器（口腔护理机）

蓝鱼科技微酸性电解水生成器（口腔护理机）

三包凭证

三包凭证

客户姓名

客户姓名

联系电话

联系电话

客户地址

客户地址

序列号

序列号

产品型号

产品型号

购机日期

购机日期

购机商店

购机商店

商店地址

商店地址

商家联系电话

商家联系电话

发票号码

发票号码

客户留存

经销商留存

## 操作说明

- 1、水杯取自来水，(建议 10-25 摄氏度)至杯内刻度线，放回主机底座。
- 2、推开主机顶部滑盖，手动添加电解质，严禁超过最高液位线。
- 3、点击开关键  打开电源；再点击启动键  ，机器开始运行，如需暂停，再次点击启动键。（多次点击都将会发出"滴"的提示音，电源键与启动键蓝色；暂停中，运行灯呈闪烁状态。）
- 4、投加泵通过电解质出液口自动定量投加电解质。
- 5、启动后，主机盖上的显示屏以倒计时秒数的方式运行。（B 款）
- 6、电解质投加完成后将自动电解生成消毒漱口水，电解完成后，蜂鸣器会发出长音提示用户次氯酸水电解完成。
- 7、点击电源键关闭电源，如长时间不操作 1 分钟后将自动关闭电源。
- 8、取下漱口杯进行洗漱。

9、如发现电解质存量不足需及时补充罐装本公司配套电解质。

## **维护与保养**

- 1、水杯内部有电极模块，不得作为容器装其他液体。
- 2、杯底电极与主机底座电极必须保持干燥。
- 3、电解过程中杯中不得放入牙刷及其他物品。
- 4、水杯底部，主机底座保持清洁无杂物，以确保电极紧密接触。
- 5、电极表面设有防护板以防止硬物冲击及金属器件触碰电极表面。
- 6、主机不得用于水洗，可以湿布清洁擦拭。
- 7、水杯杯身及内侧杯身可以冲洗后擦干。
- 8、水杯内部电极模块，禁止用金属器具清洁，用杯刷清洗即可。
- 9、如杯内有结垢可用白醋浸泡 20 分钟，冲洗干净即可。

## **使用注意事项**

- 1、使用说明:替代清水刷牙后漱口用。也可每次含 20ml 仰头漱口 30 至 60 秒后吐出，无需清水漱口。
- 2、注意事项：漱口水无刺激性，如不慎少量误食，无碍身体健康。
- 3、孕妇及三岁以上儿童皆可适用，
- 4、建议使用正常室温的自来水（10-25 摄氏度），禁止使用纯净水及其它水源。使用此温度范围外的自来水会对使用效果产生影响。
- 5、严禁空杯进行电解工作；严禁将杂物放入杯中电解工作；严禁移动运行中的机体；已完成电解工作后的漱口水，严禁再次进行电解工作。
- 6、为设备添加电解质时，应注意安全防止溅洒，如不慎接触皮肤，请用大量清水冲洗；电解质如误入眼部或者误饮，请立刻就医检查。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
蠕动泵	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限置要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某-均质材料中的含量超出 GBT 26572 规定的限置要求。

## 故障排除

1.无法开关机	电池电量低	及时充电。
2.启动不运行	水杯没放好	检测水杯是否就位。
3.电解质不投加	电解质用尽	灌装电解质。
4.运行后不电解	触点没接触	检查水杯底部和电极触点是否因杂物影响。
5.运行后报警并关机	电解过电流	取下水杯将水倒掉，重新取水并开机制取漱口水。

## 基本参数

1.主要材质	ABS
2.额定电压	DC6V
3.电池类型	18650 锂电
4.工作温度	5°C-35°C
5.工作湿度	0%-85%RH

## 电解质使用说明

- 本产品对应的电解质型号为 A001
- 请勿使用非蓝鱼科技的电解质
- 电解质的存放应该选择阴凉避光的地点
- 电解质禁止使用非原包装进行存放
- 电解质严禁与其他物品混用
- 电解质如误入眼部或者误饮，请立刻就医检查
- 电解质的存放，请远离儿童可以触碰到的地方

## 产品保修说明

蓝鱼科技微酸性电解水生成器（口腔护理机）产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收次日起 7 日内，本产品出现所列性能故障的情况，经由蓝鱼售后服务中心检测 确定，可享受免费退货或者换货服务；
- 2、自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现所列性能故障的情况，经由蓝鱼售后服务中心 检测确定，可享受免费换货或者维修服务；
- 3、自您签收次日起 12 个月内，本产品出现所列性能故障的情况，经由蓝鱼售后服务中心检测确定，可享受免费维修服务。

## **非保修条例**

- 1、 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、 已超过三包有效期；
- 3、 因不可抗力造成的损坏；
- 4、 不符合所列性能故障的情况；
- 5、 因人为原因导致本产品及其配件产生所列性能故障。